


# *i*Rest™

*SL-A50* Массажное кресло

# *i*Rest™

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

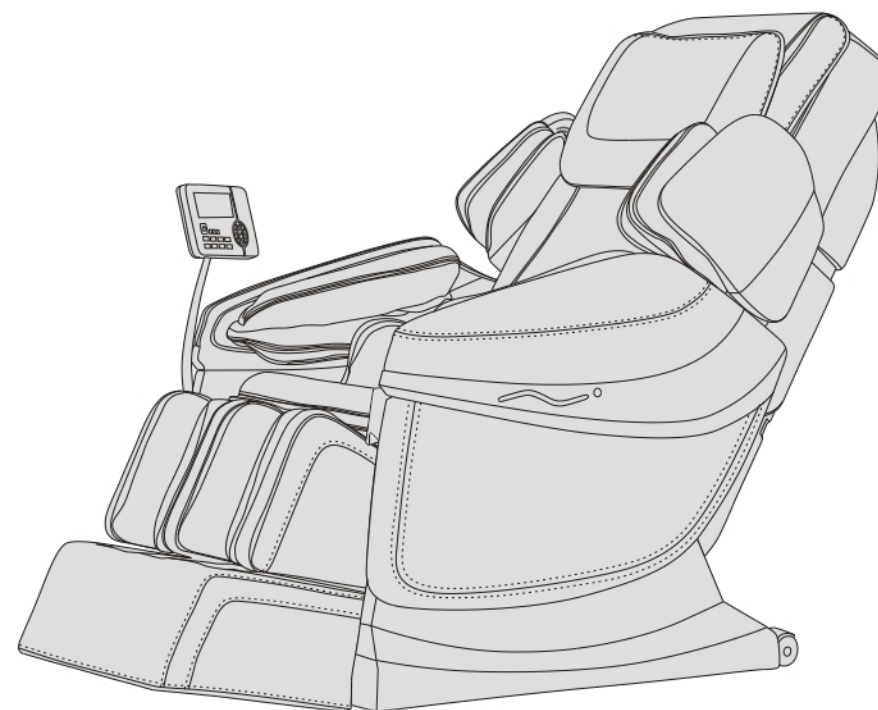

***i*Rest™**

Официальное представительство в России и СНГ  
компания "ВЕСТЕРНЛАЙН"  
тел.: +7 842 354 56 36  
e-mail: [irest@bk.ru](mailto:irest@bk.ru)

**ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ**

[www.ru-irest.ru](http://www.ru-irest.ru) e-mail: [irest@bk.ru](mailto:irest@bk.ru)


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### 11. Защита пола.


Длительное использование кресла на деревянном полу может повредить пол. Во избежание этого используйте ковер или другое покрытие.

Предостережение: Не передвигайте кресло с помощью колесиков по деревянному полу, земле или в узком пространстве. Поднимите кресло для перемещения. Для перемещения кресла возможно потребуется два человека.

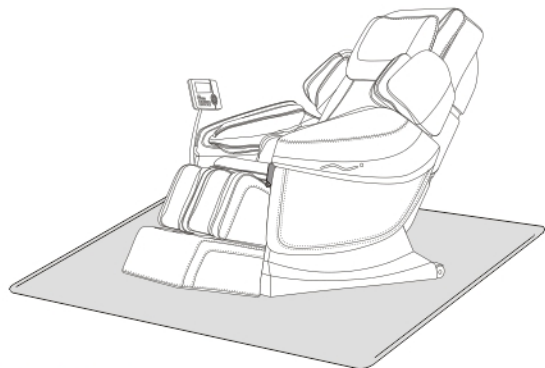

### 12. Перемещение кресла.

Убедитесь, что провода не попадают под колёсики кресла и не лежат на пути, наклоните кресло под определённым углом (чтобы центр тяжести приходился на колёсики), подвиньте кресло вперёд или назад, затем приведите кресло в устойчивое положение.

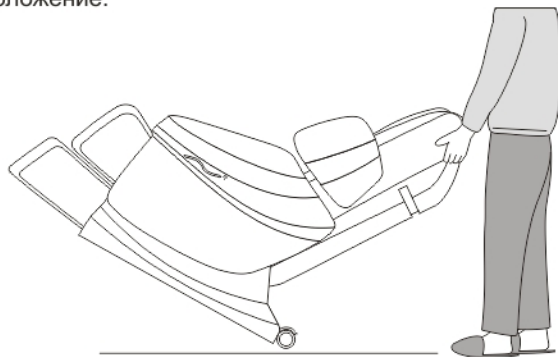

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Модель: SL-A50

Наименование: Массажное кресло

Входное напряжение: AC110-120V 60Hz

AC220-240V 50Hz / 60Hz

Мощность: 200W

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры предосторожности.....	02
Наименование компонентов.....	04
Функции и предназначение.....	05
Инструкция по эксплуатации.....	16
Спецификация продукта.....	19

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- При использовании кресла, следуйте данной инструкции.
- Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещений.
- Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.
- Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.
- Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).
- Используйте кресло только при правильном заземлении.
- Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕСЛОМ.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.
- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
- Людям с кожными заболеваниями.
- Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
- Для массажа головы, колен или в области живота.
- Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может причиной пожара, электрического шока или травмы.

Уважаемый покупатель!

Компания "iRest" благодарит Вас за лучший выбор.

Производитель массажных кресел китайская компания "iRest" имеет Сертификат Соответствия, все кресла "iRest" одобрены для использования Министерством здравоохранения Китая.

Компания "iRest" гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии \_\_\_\_\_ со дня покупки. Данным Гарантийным Сертификатом компания "iRest" берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

#### Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - \* правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
  - \* наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «iRest» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае непредставления вышеуказанных документов или информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Компания «iRest» не отвечает за недостатки Товара в следующих случаях:
  - а) Использования Товара, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих назначению Товара;
  - б) Нарушения правил и условий эксплуатации, установки Товара, указанных в инструкции по эксплуатации;
  - в) Если на Товаре повреждены пломбы, имеются следы вскрытия, нарушения целостности Товара или следы попыток ремонта Товара при отсутствии подтверждения предварительного извещения Потребителя об обнаружении недостатков качества Товара;
  - г) Если недостатки качества вызваны внесенными в конструкцию или схему товара изменениями, которые не предусмотрены изготовителем;
  - д) Если недостаток Товара стал следствием действия непреодолимой силы, несчастного случая, умышленных или неосторожных действий (бездействия) Потребителя или третьих лиц;
  - е) Возникновения недостатков вследствие воздействия на Товар, а равно проникновения внутрь веществ, материалов, жидкостей, насекомых;
  - ж) Подключения Товара к сети или источнику электрического питания, параметры электрической энергии которых не соответствуют действующим в Российской Федерации техническим регламентам, а равно в случае возникновения недостатков по причине временного отклонения параметров электрической энергии от требований вышеуказанных регламентов (перепад напряжения и т.п.)
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается не действительным.





# Гарантийный Сертификат

Наименование изделия: .....

Страна происхождения: КИТАЙ

Серийный номер: .....

Дата покупки: « ..... » ..... 20 ..... г.

Подпись продавца: .....

## ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю  
компании «iRest» в вашем регионе.

## СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф. И. О. : .....

Адрес: .....

ТЕЛЕФОН: .....

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.

Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии  
ознакомлен.

Подпись покупателя: .....

Место продажи: .....

Место для печати:

[www.ru-irest.ru](http://www.ru-irest.ru)



## БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
- Не пытайтесь включить\выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
- Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
- Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
- Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
- Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
- Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
- Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку "off", затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
- Никогда ничего не засовывайте в отверстия.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- При работедвигающиеся механизмы кресла издают специфичные звуки.
- Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
- Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
- При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после полчасового перерыва.

## НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

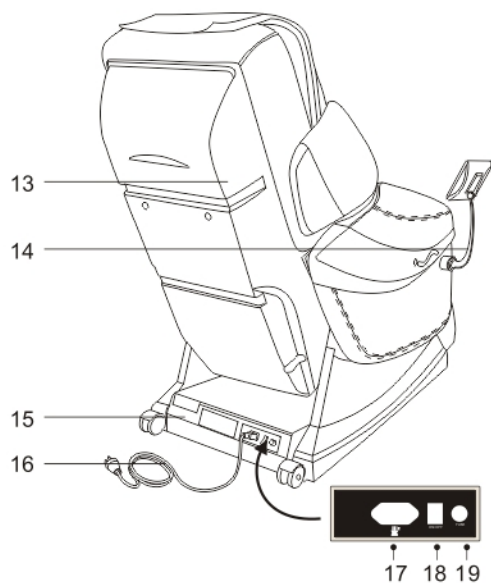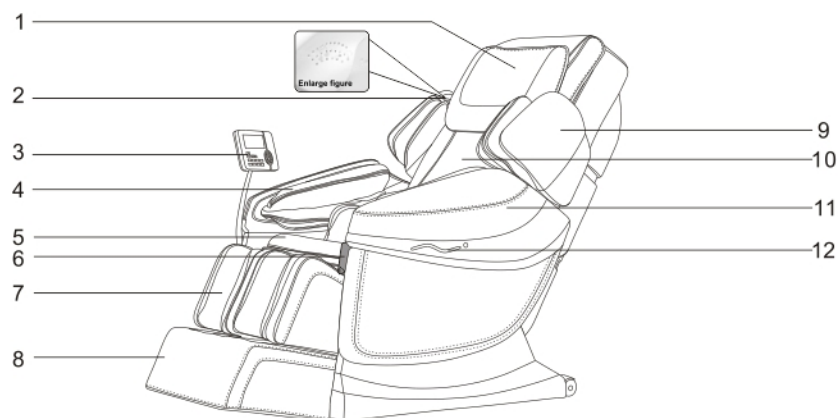


- 1.Накидка
- 2.3D динамики для цифрового аудио воспроизведения
- 3.Пульт управления
- 4.Подлокотник с воздушными подушками
- 5.Подушка сидения
- 6.Карман для мобильного телефона
- 7.Отделение для икр
- 8.Отделение для ступней
- 9.Отделение для плеч с воздушными подушками
- 10.Задняя подушка
- 11.Отделение для рук
- 12.Светодиодный цветной рисунок
- 13.Задняя панель
- 14.Подставка под пульт управления
- 15.Задние колёсики
- 16.Шнур и штепсельная вилка
- 17.Разъём для штепсельной вилки
- 18.Включение/выключение питания
- 19.Разъём для предохранителя


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 9. Установка пульта управления и его использование

Вставьте пульт управления в отверстие в подлокотнике (рис.1), основание может свободно крутиться влево и вправо. (Рис.2) Также вы можете свободно перемещать пульт управления в горизонтальном направлении.

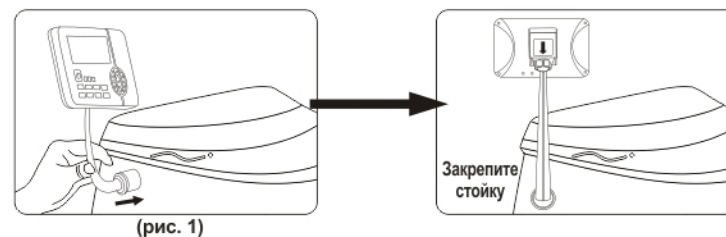

(рис. 1)

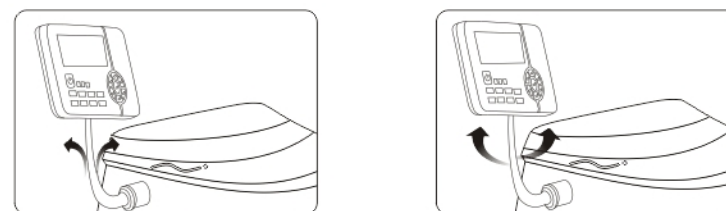


(рис. 2)

Закрепите  
стойку

(рис. 3)

### 10. Регулировка и применение накидки и подушки кресла

Вы можете ослабить/усилить интенсивность массажа шеи и плеч за счёт использования/снятия подушки с накидки, вы можете пользоваться ей по своему усмотрению (рекомендуется использовать подушку с накидкой). Накидка присоединяется к спинке кресла при помощи застёжки-молнии (1), подушка присоединяется к накидке при помощи липучки (2).

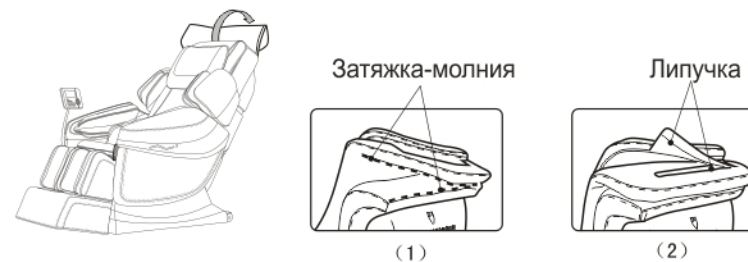


(1)


(2)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Вставьте цилиндрическую крепёжную трубу в отверстие на правом подлокотнике, убедитесь, что отверстие на крепёжной трубе совпадает с отверстием на подлокотнике. (рис.5)
- Вкрутите три крепёжных винта. (рис.6)

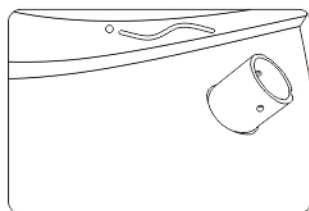


(рис. 5)

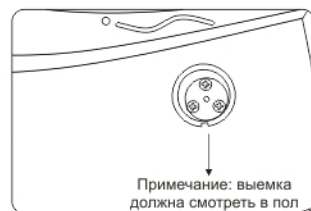


(рис. 6)

- Подготовьте собранную (шаг 3) конструкцию. (рис.7)
- Вставьте конструкцию в цилиндрическую крепёжную трубу, убедитесь что отверстия совпадают. (рис.8)

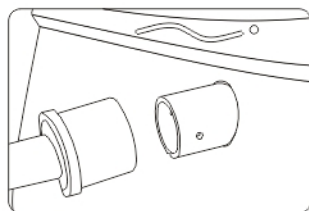


(рис. 7)

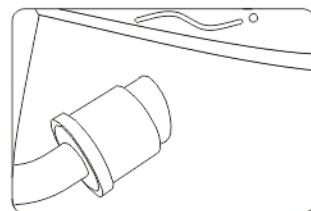


(рис. 8)

- Подготовьте крепёжные винты для обеих сторон. (рис.9)
- Затяните винты на обеих сторонах, сборка закончена. (рис.10)

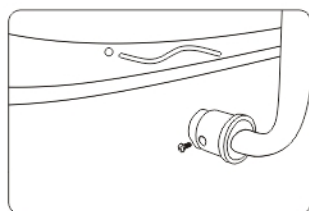

(рис. 9)

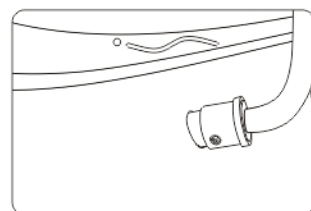

(рис. 10)



## ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

### Функции


- Данное кресло оснащено механическими "3D-руками", которые при прокатывании вверх-вниз по спине с помощью 4-х роликов воспроизводят массаж.
- Отделения массажа плеч оснащены специальным автоматическим устройством сканирования и регулировки, с помощью которого происходит трехмерное сканирование индивидуальных особенностей вашего тела, определяются расстояние между "механическими руками", а также изгибы вашего тела для воспроизведения наиболее гармоничного и правильного массажа.
- Комфорт, лёгкость, снятие напряжения в мышцах, воздушно-компрессионный массаж всего тела, скручивание в области поясницы, вытяжка области поясницы и другие специальные функции массажа.
- Имеются три кнопки для запоминания массажа.
- Ручной режим позволяет осуществлять три функции массажа верхней части тела, а именно общий массаж, фиксированный и массаж конкретно заданных точек. Ручной режим дает возможность самостоятельно выбрать один из 6 видов массажа (растирание плеч, разминание, похлопывание, шиацу синхронное похлопывание и разминание и 3D массаж); доступны 5 уровней скорости; в режимах похлопывания и шиацу возможно регулировать "механические руки" в пределах 5 позиций.
- Кресло оснащено специальным отделением для массажа рук, которое оснащено 26 воздушными подушками, отделением для массажа верхней части рук, плеч, которое оснащено 4 воздушными подушками и имеет 3 уровня воздействия.
- Кресло имеет два режима управления: автоматический и ручной. При автоматическом режиме осуществляет массаж верхней части тела: массаж плеч и массаж шеи, массаж спины и поясницы, и предполагает следующие массажные функции: легкий массаж, комфортный массаж; массаж, снимающий боль и усталость.
- Воздушно-компрессионный массаж нижней части тела: массаж задней части тела осуществляется с помощью 4 воздушных подушек, в области ягодиц находятся 8 воздушных подушек, воздушно-компрессионный массаж ног осуществляется с помощью 38 воздушных подушек; имеется возможность изменять интенсивность надавливания (3 уровня).
- В отделение для плеч встроены динамики, которые производят музыку от мобильного телефона через специальный кабель.
- Имеется функция подогрева спины с помощью инфракрасных лучей.
- Имеется функция подогрева колен с помощью инфракрасных лучей.
- Имеется возможность регулировки высоты голени.
- Спинка и отделение для икр обладают функцией откидывания и автоматического возврата в исходное положение. Можно откидывать спинку как совместно с отделением для икр, так и отдельно от него.
- После выключения кресла ролики приводятся в исходное положение.
- Люминесцентный дисплей пульта управления.
- Светодиодный цветной рисунок на отделении для рук.

### Предназначение


- устранение усталости
- улучшение кровообращения
- облегчение боли в мышцах
- снятие напряжения в мышцах
- снимает нервную и мышечную усталость

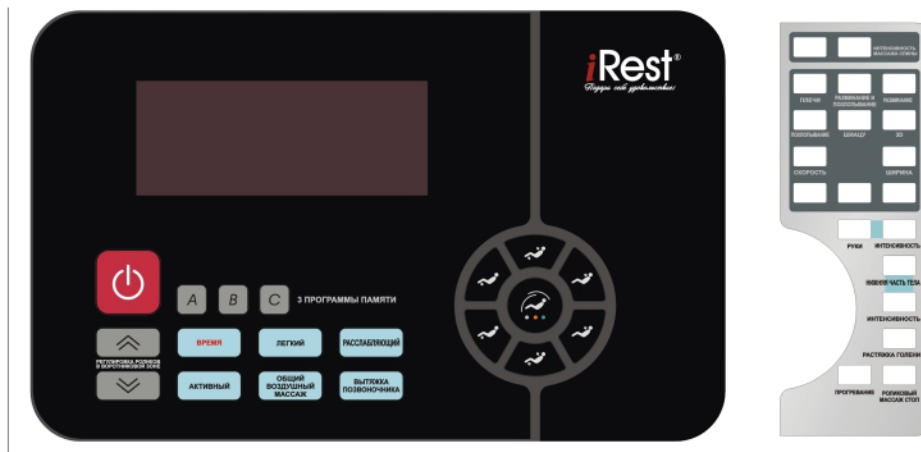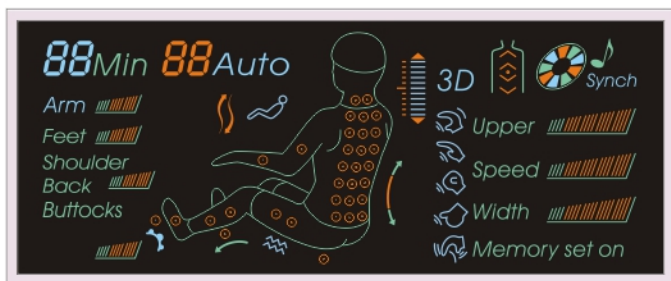


8. Установка подставки под пульт управления

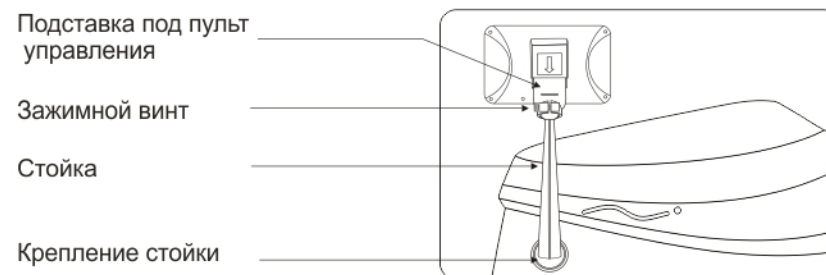

- Подготовьте подставку под пульт, стальную стойку, крепёжные винты. (рис.1)
- Вставьте шарнирное соединение стальной стойки в сферическое отверстие подставки. (рис.2)

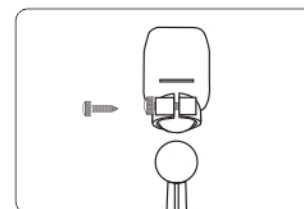


(рис. 1)

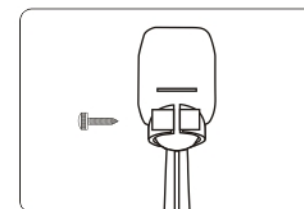


(рис. 2)

- Вкрутите винты в отверстия и затяните их, соблюдайте направление - справа налево. (рис.3)
- Подготовьте цилиндрическую крепёжную трубу (рис.4)

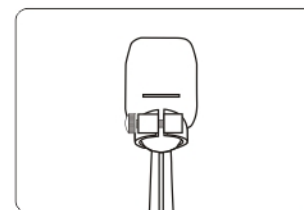


(рис. 3)

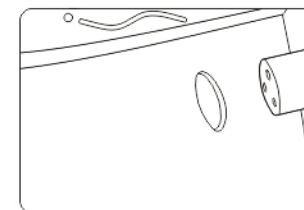


(рис. 4)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Подсоедините отделение для плеч, аудио кабель и воздушную трубку в отделение для спины. Убедитесь, что соединения прочны и без воздушных утечек (рис.3)
- После того, как вы подсоединили воздушную трубку и аудио кабель, убедитесь, что провода находятся внутри отделения для плеч. Не перегибайте провода и кабели (рис.4)

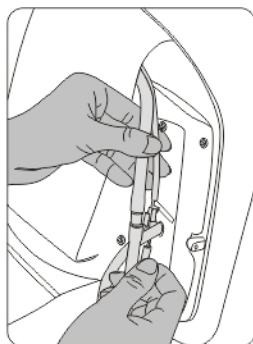


(рис. 3)

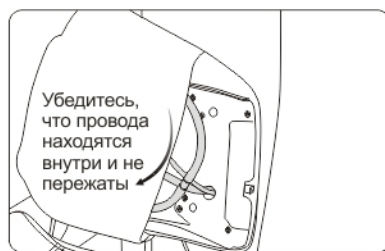


(рис. 4)

- Установка декоративной панели. Вставьте панель в слот крышки отделения для плеч. Слегка надавите на край панели, заходящий в слот и зафиксируйте её. Будьте аккуратны, старайтесь не повредить ободок панели во время её установки. (рис.5)

- Закрепите панель с помощью поперечных винтов с цилиндрической головкой, входящих в комплект (рис.6)

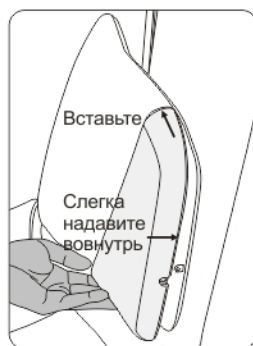

(рис. 5)

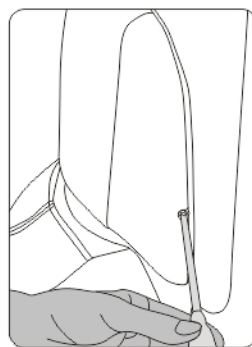

(рис. 6)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Подключение



### 2. Начать/остановить массаж

- Чтобы начать массаж нажмите на красную кнопку, массажное кресло автоматически примет положение нулевой гравитации.
- Автоматическое сканирование - подождите пока закончится сканирование.
- После окончания сканирования, вы услышите предупреждающий звук. Задайте верхнюю точку массажа на уровне плеч с помощью кнопки вверх-вниз. Если вы не задали точку вручную, сеанс массажа автоматически начнётся через 10 секунд.

Переведите массажные ролики вверх на необходимый вам уровень		↑ Регулировка исходного положения роликов на уровне плеч (кнопка вверх)
Переведите массажные ролики вниз на необходимый вам уровень		↓ Регулировка исходного положения роликов на уровне плеч (кнопка вниз)



- Нажмите на одну из кнопок для выбора определенного вида массажа.
- Воспроизведение массажа в режиме запоминания
- Во время сеанса массажа вы можете использовать кнопки А, В, С запоминания программ, при нажатии одной из них, вы запустите программу сохранённого в памяти сеанса массажа

A

B

C

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕАНСОВ МАССАЖА



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### • Настройка времени

Кнопки	Описание
<b>ВРЕМЯ</b>	Фиксированное время массажа - 20 минут. Максимальное рабочее время - 40 минут. Каждое нажатие на кнопку установки времени прибавит 5 минут. По истечении 40 минут при нажатии на кнопку установки времени вы возвратитесь к исходным 5 минутам. И так циклично повторяется.

### • Автоматический режим

<b>ЛЕГИЙ</b>	Комфорт: расслабляет мышцы	<b>F1 Auto</b>
<b>РАСЛАБЛЯЮЩИЙ</b>	Расслабление: улучшает кровообращение	<b>F2 Auto</b>
<b>АКТИВНЫЙ</b>	Устранение боли: глубокий точечный массаж для устранения мышечной боли	<b>F3 Auto</b>
<b>ОБЩИЙ ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ</b>	Общий воздушно-компрессионный массаж всего тела: поясницы, ягодиц, рук, ног	<b>F4 Auto</b>
<b>ВЫТЯЖКА ПОЗВОНОЧНИКА</b>	Вытяжка позвоночника: Во время работы воздушных подушек в области голени (сжатие голени), отделение спины опускается, позвоночник вытягивается, после чего кресло принимает исходное положение, затем процесс повторяется. В это время воздушные подушки сидалища и массажный механизм активны.	<b>F5 Auto</b>

### • Функции ручного режима

Кнопки	Описание	Дисплей
<b>ПЛЕЧИ</b>	Сжатие: один режим массажа, доступна регулировка скорости и интенсивности массажа	(H1)
<b>РАЗМИНАНИЕ И ПОХЛОПЫВАНИЕ</b>	Разминание и похлопывание: один режим массажа, доступна регулировка скорости и интенсивности массажа	(H1)
<b>РАЗМИНАНИЕ</b>	Разминание: один режим массажа, доступна регулировка скорости и интенсивности массажа	(H1)
<b>ПОХЛОПЫВАНИЕ</b>	Постукивание: два режима массажа, доступна регулировка скорости, ширины роликов и интенсивности массажа	(H1-H2)
<b>ШИАЦУ</b>	Шиаци: два режима массажа, доступна регулировка скорости, ширины роликов и интенсивности массажа	(H1-H2)
<b>3D</b>	3D: четыре режима массажа, доступна регулировка скорости и интенсивности массажа	3D (H1-H4)
<b>СКОРОСТЬ</b>	Скорость: 5 уровней	Speed
<b>ШИРИНА</b>	Ширина: 5 уровней (в режимах похлопывания и разминания)	Width

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- После того, как вы закрепили боковину на фиксированную стальную раму, нажатием закрепив её с помощью металлических направляющих, проверьте прочность сборки, потянув боковину на себя (рис.7)
- Найдите установочное отверстие в передней части фиксированной стальной рамы, вкрутите винт в отверстие с помощью шестигранного ключа. (рис.8)
- Найдите установочное отверстие в задней части фиксированной стальной рамы, закрутите винт в отверстие с помощью шестигранного ключа. Установка боковины окончена. По той же схеме происходит сборка второй боковины. (рис.9)



(рис. 7)

Шестигранная головка винта, вкрученная в переднюю часть отделения для рук (рис. 8)




Шестигранная головка винта, вкрученная в заднюю часть отделения для рук (рис. 9)




### 7. Установка отделений для плеч

- Воздушная трубка и аудио кабель в задней части кресла проходят через отверстие в отделении для плеч. Две направляющих шпильки отделений для плеч входят в соответствующие отверстия в крышке отделения для спины (рис.1)
- Отделение для плеч прижмите вплотную, закрепляя его на крышке отделения для рук с помощью двух углубленных поперечных винтов с цилиндрической головкой (рис.2)

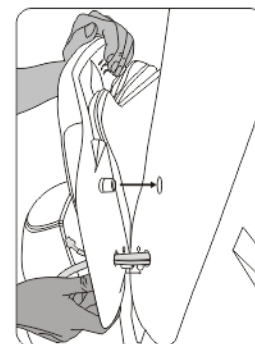

(рис. 1)

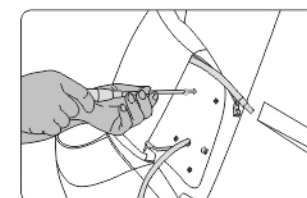


(рис. 2)


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### 6. Установка боковин кресла

- Пропустите патрубки, идущие от сиденья кресла, через квадратное отверстие на стальной раме. (рис.1)
- Проверьте, все ли патрубки, необходимые для соединения с боковиной кресла находятся снаружи стальной рамы (рис.2)

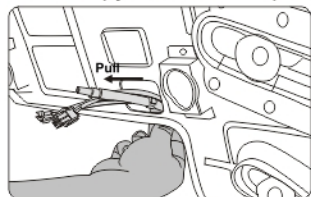


(рис.1)

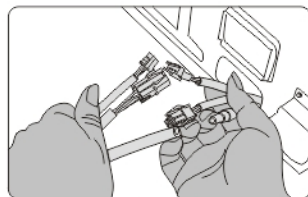

(рис.2)


- Вытяните патрубки из сиденья и подсоедините их с патрубками от боковины кресла в местах соединения, воздушная трубка будет находиться справа. (рис.3)

- После того, как вы подсоедините все патрубки, аккуратно вставьте места разъёмов обратно в квадратное отверстие стальной рамы сиденья, не загибайте воздушную трубку (рис.4)

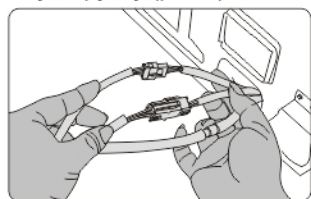



(рис.3)

ВСТАВЬТЕ В КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ СТАЛЬНОЙ РАМЫ СИДЕНЬЯ

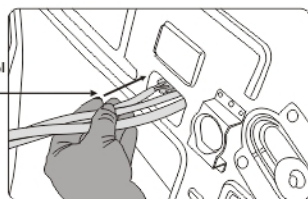

(рис.4)

- Как показано на рисунке, металлические направляющие боковины должны попадать в отверстия на фиксирующей стальной раме кресла (рис.5)
- Приподнимите боковину и начните закреплять её в передней части, металлические направляющие должны войти в отверстия на стальной раме, сначала передняя часть боковины, затем задняя (убедитесь, что патрубки аккуратно заходят в квадратное отверстие под сиденье кресла, как описано выше, избегайте повреждения патрубков), в результате боковина должна быть полностью надета на стальную раму кресла. (рис.6)

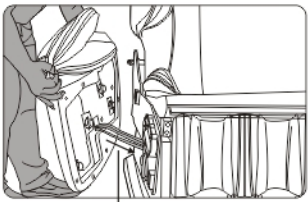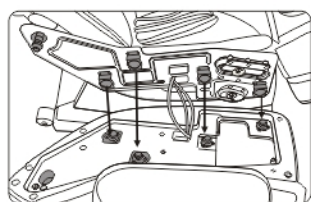

Примечание: будьте внимательны с разъёмами патрубков и их расположением

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки	Описание	Дисплей
РЯСТЯЖКА СПИНЫ	Фиксированный массаж конкретной точки	
РЯСТЯЖКА СПИНЫ	Частичный массаж маленькой области	
РЯСТЯЖКА СПИНЫ	Общий массаж верхней части тела	
ОПУСТИТЬ	Регулировка позиции роликов (в режиме фиксированного и частичного массажа)	Механические руки опускаются
ПОДНЯТЬ		Механические руки поднимаются
3D	3D: четыре режима массажа, доступна регулировка скорости и интенсивности массажа	3D (H1-H4)
СКОРОСТЬ	Скорость: 5 уровней	Speed
ШИРИНА	Ширина: 5 уровней (в режимах похлопывания и разминания)	Width









Примечание: растяжка спины (функционируют все ручные режимы, кроме режима «сжатие плеч»)

### • Воздушно-компрессионный массаж








Кнопки	Описание	Дисплей
РУКИ	Руки: при нажатии кнопки включается воздушно-компрессионный массаж рук и верхней части рук	Руки
ИНТЕНСИВНОСТЬ	Интенсивность: 3 уровня	Руки
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА	Нижняя часть тела: при нажатии кнопки включается воздушно-компрессионный массаж нижней части тела (включая ноги, спину, поясницу и голень)	Стопы Спина Ягодицы
ИНТЕНСИВНОСТЬ	Интенсивность: 3 уровня	
РЯСТЯЖКА ГОЛЕНИ	Функция растяжки голени включается автоматически во время режимов воздушно-компрессионного массажа нижней части тела и воздушно-компрессионного массажа голени	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### • Другие функции ручного массажа

Кнопки	Описание	Дисплей
	Кнопка уменьшения интенсивности массажа верхней части спины	Upper 
	Кнопка увеличения интенсивности массажа верхней части спины	Upper 
	Роликовый массаж стоп: включение роликового массажа стоп, доступны 3 уровня скорости	
	Прогревание: включение функции прогревания спины и коленей, возникает приятное чувство комфорта через три минуты после включения	

### 3. Угол наклона отделения спины и отделения ног


Кнопки	Описание	Дисплей
	Автоматический режим: при включении автоматической регулировки отделений спины и ног, приведи кресло в одно из трёх предложенных положений.	(01 ~ 03) Auto
	Кнопка подъёма отделения ног: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно поднять отделение ног, для фиксации отпустите кнопку.	
	Кнопка опускания отделения ног: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно опустить отделение ног, для фиксации отпустите кнопку.	
	Кнопка подъёма отделения спины: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно поднять отделение спины, для фиксации отпустите кнопку.	
	Кнопка опускания отделения спины: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно опустить отделение спины, для фиксации отпустите кнопку.	
	Кнопка приведения кресла в исходное положение: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно поднять отделение спины и одновременно опустить отделение ног, для фиксации отпустите кнопку.	
	Кнопка приведения кресла в лежачее положение: удерживайте данную кнопку, чтобы плавно опустить отделение спины и одновременно поднять отделение ног, для фиксации отпустите кнопку.	

### 4. Угол наклона отделения спины и отделения ног

- Воспроизведение цифровой музыки: установите ваш мобильный телефон в специальное отделение на левом отделении для рук, подсоедините к аудио устройству, включите музыку и наслаждайтесь выбранной вами мелодией во время массажа.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- С помощью 3D цифрового аудио на правом и левом отделениях плеч вы можете подключить свой мобильный телефон и наслаждаться любимой музыкой во время сеанса массажа.
- Светодиодный цветной рисунок на обоих отделениях для рук меняется автоматически: красный, зелёный, синий, сине-зелёный, сиреневый, жёлтый, белый.

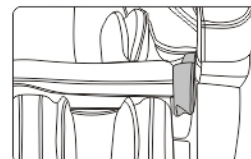

Кармашек для мобильного телефона (аудио интерфейс)



3D цифровое аудио



Светодиодный цветной рисунок

### 5. Выключение кресла и остановка сеанса массажа.

- Нажатием на красную кнопку во время массажа работа кресла останавливается, спинка и отделение для ног автоматически возвращаются в исходное положение. По окончании определённого времени сеанса массажа все функции отключаются, но отделения для спины и ног не возвращаются в исходное положение.
- По окончании определённого времени сеанса массажа или при выключении, на дисплее отобразится "Memory set On", и во время мигания кнопок А, В и С можно нажать на любую из них, чтобы сохранить начальные данные массажа перед тем, как сеанс массажа остановится. Вы также можете нажать на красную кнопку, чтобы выключить кресло и вернуть массажный механизм в исходное положение. Если вы не нажмете на кнопку, кресло выключится автоматически через 10 минут, массажный механизм вернётся в исходное положение.



- Выключение питания кресла (Отключение питания кресла из сети)

